

TESTING COVID-19 WOONZORGCENTRUM: BEWONERS

- NASOFARYNGEALE WISSER methode -

WORKFLOW

(versie 19/04/2020)

Zie algemene workflow voor volledig overzicht.

VOORBEREIDING

MATERIAAL

- Kar met materiaal op
- Flexibele neuswisser + geschikt medium (eSwab/UTM/Multicollect): tube met **oranje of rode dop**
- Labozakjes
- Alcoholgel
- Javeloplossing + doekjes
- Tissues
- Vuilbak (bij voorkeur pedaalemmer)
- Doos voor stalen



AANTREKKEN PBM

- Wit pak + wegwerpschoort
- Bril en/of face shield
- Mondmasker: chirurgisch masker (tip: vastplakken op neus om aandampen te vermijden) of FFP2 zónder ventiel
- Handschoenen: 1 paar vastkleven aan schoort, 2^e paar over de andere

TESTLOCATIE

- Optie A: mobiele asymptomatische bewoners kunnen naar een centrale plaats worden gebracht, mits voldoende afstand wordt bewaard tussen bewoners.
- Optie B: niet-mobiele of symptomatische bewoners worden best op de eigen kamer getest.


PROCEDURE OPTIE A

Cf procedure testing personeel

PROCEDURE OPTIE B

1. Kleef vooraf een mutualiteitsklever + barcodesticker op het labo-formulier en op het overzichtsblad.
2. Arts en medewerker WZC gaan kamer binnen.
Neem mee: 1 zakje met testtube + tissue voor bewoner.
3. Stel jezelf voor en leg uit wat je gaat doen.
4. Bevraag symptomen bij de bewoner (om achteraf op labo-formulier in te vullen).
5. Neem het testbuisje uit het zakje, draai het op en laat de WZC-medewerker het vasthouden.
6. Geef de bewoner een tissue (in geval dat deze moet niezen).

7. Laat de bewoner het hoofd in lichte hyperextensie houden en sta bij voorkeur aan de zijkant van de bewoner. Laat de medewerker achter de patiënt staan of op afstand.
8. Breng de wisser **+/-10cm** (tot rood streepje) in de neus in de richting van het oor tot je een weerstand voelt. Draai de wisser een 5-tal keer rond en laat deze 15 seconden ter plaatse!
Trek traag de wisser terug terwijl je nog verder ronddraait.

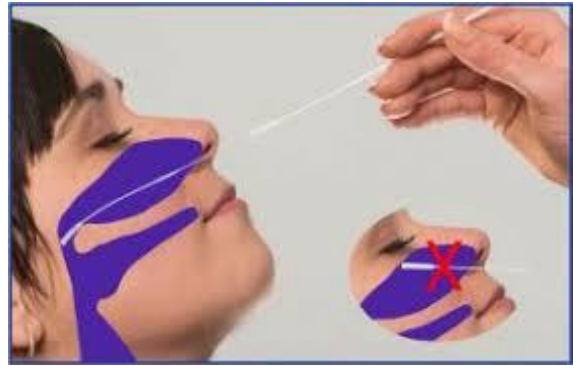

9. Steek de wisser in het buisje en breek staafje af. De medewerker plaatst het buisje in het zakje en sluit het goed.
10. Verlaat de kamer en gooi je handschoenen weg.
11. Heeft de patiënt geniest/gehoest of heeft je schort contact gemaakt met patiënt of zijn bed?
Zo ja, doe je schort uit, daarna je handschoenen en daarna je masker en bril. Ontsmet je bril, handen en doe een nieuwe schort, handschoenen en masker aan.
12. Vul het labo-formulier Sars-Cov2 verder in met symptomen en steek het in een 2^e apart zakje. Plaats daarbij ook het zakje met het testbuisje. Deponeer in de voorziene doos en ontsmet het werkvlak (kar).

Na de collectie:

13. In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C)