

TESTING COVID-19 WOONZORGCENTRUM: PERSONEEL

- NASOFARYNGEALE WISSER methode -

WORKFLOW ARTS

(versie 19/04/2020)

Zie algemene workflow voor volledig overzicht.

VOORBEREIDING

MATERIAAL IN LOKAAL ARTS

- Flexibele neuswisser + geschikt medium (eSwab/UTM/Multicollect)): tube met **oranje of rode dop**
- Labozakjes
- Alcoholgel
- Javeloplossing + doekjes
- Tissues
- Vuilbak (bij voorkeur pedaalemmer)
- 1 tafel + 2 stoelen
- Doos voor stalen




AANTREKKEN PBM

- Wit pak + wegwerpschort
- Bril en/of face shield
- Mondmasker: chirurgisch masker (tip: vastplakken op neus om aandampen te vermijden) of FFP2 zonder ventiel
- Handschoenen: 1 paar vastkleven aan schort, 2^e paar over de andere

PROCEDURE

1. Open de deur en roep een patiënt binnen. Stel jezelf voor en leg uit wat je gaat doen.
2. Laat de patiënt meteen op de stoel zitten en vraag hem/haar het zakje met het testbuisje + aanvraagformulier.
3. Neem het testbuisje uit het zakje en zet het opgedraaid op de tafel.
4. Geef de patiënt een tissue (in geval dat deze moet niezen).
5. Laat de patiënt het hoofd in lichte hyperextensie houden en sta bij voorkeur aan de zijde van de patiënt.
6. Breng de wisser +/-10cm (tot rood streepje) in de neus in de richting van het oor tot je een weerstand voelt. Draai de wisser een 5-tal keer rond en laat deze 15 seconden ter plaatse!
Trek traag de wisser terug terwijl je nog verder ronddraait.
7. Steek de wisser in het busje en breek staafje af. Plaats het busje in het zakje en plak het toe.
8. Patiënt ontsmet z'n handen en verlaat de ruimte.
9. Heeft de patiënt geniest/gehoest? Zoja, ventileer meteen de ruimte en trek een nieuwe wegwerpschort aan.
10. Plaats het zakje met testbuisje en doekje in een 2^e zakje samen met het aanvraagformulier.
11. Trek je buitenste paar handschoenen uit en ontsmet alle oppervlaktes die de patiënt heeft aangeraakt.
12. Trek nieuwe handschoenen aan boven je 1^e paar en roep de volgende patiënt binnen.

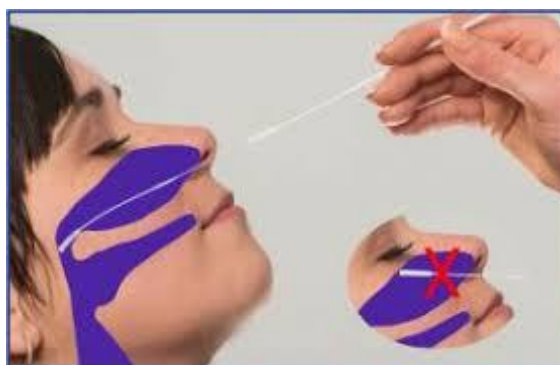

Na de collectie:

13. In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C)